


# Dispositivo per incisione cutanea

Il dispositivo per incisione cutanea **Bruno** permette di prelevare il sangue capillare dalla punta del dito (e da altri siti alternativi) praticamente senza dolore.



**Il dispositivo per incisione vi consente 6 profondità di incisione della pelle:**

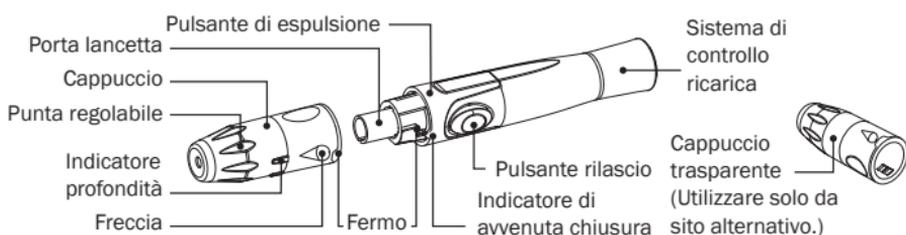


## Attenzione!


### Per ridurre la possibilità di infezione:

- ▶ Non condividete mai la stessa lancetta o il sistema di incisione.
- ▶ Usate sempre una lancetta sterile nuova. Le lancette sono monouso.
- ▶ Evitate di toccare le lancette o il sistema di incisione con le mani sporche o se avete maneggiato creme o olio.
- ▶ Le lancette possono essere potenzialmente pericolose. Smaltitele secondo la normativa vigente.

## Impostazione del dispositivo per l'incisione cutanea

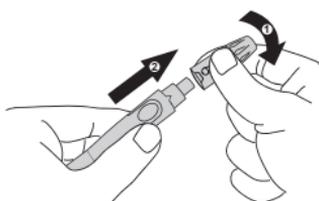


**1.** Ruotare e tirare il cappuccio del dispositivo per l'incisione cutanea.

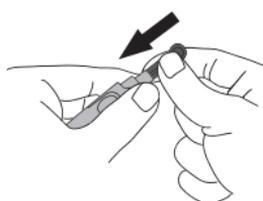


**2.** Inserire una lancetta nel portalancetta e spingerla fino a che non è ben inserita.



**3.** Ruotare il disco protettivo per rimuoverlo dalla lancetta.

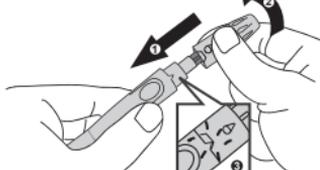

**4.** Sistemate di nuovo il cappuccio e fatelo girare a destra per chiudere il fermo come viene mostrato nella figura fino a sentire un click. Quando il dispositivo è chiuso correttamente l'indicatore di avvenuta chiusura si trova completamente a destra.

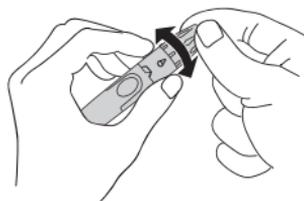

**5.** Tenendo il cappuccio selezionate la profondità di incisione facendo girare la punta regolabile in entrambe le direzioni in modo che la freccia sul cappuccio indichi la profondità desiderata.




**6.** Tirare indietro il sistema di controllo ricarica fino a udire uno scatto. Quando è pronto si noterà un cambiamento di colore all'interno del pulsante di rilascio.

▶ **Tenere le dita sul dispositivo e non sul cappuccio.**

## Nota!

### Prima di prelevare una goccia di sangue:

- ▶ Lavare e asciugare accuratamente le mani.
- ▶ Stabilire il punto di incisione del dito.
- ▶ Massaggiare il punto di incisione per almeno 20 secondi prima dell'incisione.
- ▶ Pulire il punto di incisione con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol al 70% e lasciare asciugare.

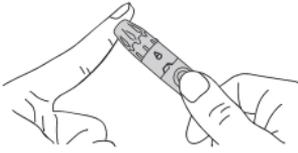


#### 7. Incisione del dito

Mantenere il dispositivo fermo contro la parte inferiore della punta del dito. Premere il pulsante di rilascio per pungere il dito, sentirete un click a indicare che la puntura è terminata.



#### 8. Togliete il dispositivo dal punto di

incisione. Dopo la penetrazione, scartate la prima goccia di sangue con un batuffolo di cotone pulito. Comprimete delicatamente l'area di incisione fino ad ottenere un'altra goccia di sangue. State attenti a non spalmare il campione di sangue. Applicate il sangue sulla striscia reattiva.

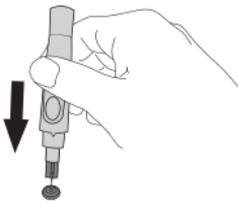


9. Togliete la lancetta svitando per prima cosa il cappuccio. Mettete il disco protettivo su una superficie dura e premete la punta della lancetta dentro il disco.



10. Fate scorrere il pulsante di espulsione per togliere la lancetta usata. Smaltite la lancetta secondo la normativa vigente.

▶ **Per prelevare campioni di sangue da siti diversi dalla punta del dito, utilizzate il cappuccio trasparente.**

## Test da siti alternativi

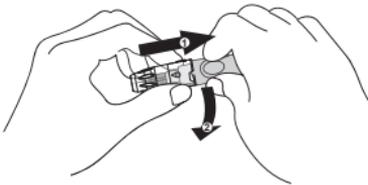

### Nota!

Questa opzione non è effettuabile con tutti i dispositivi. Fate riferimento alla sezione **Usò Previsto** nel manuale del vostro misuratore di glucosio nel sangue per vedere se potete eseguire un test da siti alternativi con il vostro dispositivo.

L'esecuzione di un test da un sito diverso da quello della punta del dito viene denominato AST (Alternative Site Testing). Prima di eseguire un test da un sito alternativo consultate il manuale del vostro misuratore alla sezione **Test da sito alternativo**. Quando eseguite un test da un sito alternativo, sostituite il cappuccio del dispositivo di incisione con il cappuccio trasparente. Tirate indietro il sistema di controllo fino a sentire un "click". Se eseguite l'incisione sul braccio, sull'avambraccio, sulla mano, sulla coscia o sul polpaccio, evitate di eseguire l'incisione in zone con vene in evidenza in modo da prevenire un eccesso di sanguinamento.

## Pulizia

- Le lancette sono monouso.
- Il dispositivo di incisione è riutilizzabile.
- Pulite il dispositivo di incisione con un panno con acqua.
- Non sciacquate il dispositivo sotto l'acqua corrente.
- Disinfettate il cappuccio tenendolo per 10 minuti in alcol al 70% e poi fatelo asciugare all'aria.
- Non mettete il dispositivo in lavastoviglie e non usate dei detersivi.

## Simboli

| Simbolo | Riferimento                                       |
|---------|---|
|         | Non riutilizzare                                  |
|         | Consultare le istruzioni prima dell'uso           |
|         | Fabbricante                                       |
|         | Attenzione, consultare la documentazione allegata |
|         | Sterilizzato tramite radiazioni                   |

### Distributore

**Bruno Farmaceutici S.p.A.**  
Via delle Ande, 15  
00144 ROMA - ITALIA  
Tel +39 06 6050601  
Fax +39 06 60506050

TaiDoc Technology Corporation  
B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd.,  
Wugu Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan

MedNet GmbH  
Borkstraße 10  
48163 Münster, Germany

0123